

Miljøvennlig og biologisk nedbrytbar!

Opti-prep Ultra



- Opti-prep Ultra gir en kraftig og sikker rengjøring/ desinfisering av dentale instrumenter.
- Brukes i desinfeksjonsbeholdere og ultralyd bad.
- Meget effektiv til rengjøring av spyttugere, slanger, aluminium, plast, glass m.m.
- Fjerner smuss fra hardmetallbor, endo-filer og håndinstrumenter.
- Ingen stålborster – ingen ødelagte instrumenter.
- Gir 150 liter bruksferdig løsning.

SPAR TID!

Thompson komposittinstrumenter

Thompson kniv er et uunnværlig instrument for rask og sikker fjerning av overskudd på alt av kompositter. Hvite linjer kommer ofte av friksjon eller varme generert av pusseskiver. Ved bruk av Thompson kniver unngår du denne varmefriksjonen som kan være årsaken til fraktur av kompositt/tann.




1011
Gingival trimmer

1012
Interproksimal trimmer

Se også vår Produkt- og prosedyrekatalog, side 64 og 68.


Rengjøring med Opti-prep

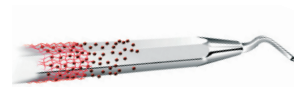

Instrumentoverflaten er elektrostatiske ladet. Biofilmen kleber til overflaten.



Instrumentet ligger i en Opti-prep Ultra-løsning. Polymerer med både positivt og negativt ladede partikler utnytter det elektriske potensialet.

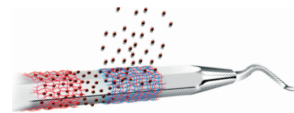

Overflateladningen nøytraliseres av Opti-prep Ultra, slik at biofilmen løsner fra overflaten.




Polymerene i Opti-prep Ultra danner en beskyttende film som isolerer overflaten og beskytter mot rekontaminasjon. Resultatet er at 99,9 % av urenheterne er fjernet.



14550 Opti-prep Ultra kr 895,-
1 x 750 g pulver

19632 Thompson komposittkniv kr 490,-
1011 eller 1012

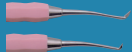

Norsk Orthoform  Depot as

Tvetenveien 158 - Postboks 95, NO-0617 Oslo, Norway - Telefon +47 2276 0140
Telefax +47 2226 0230 - bestilling@norskorthoform.no - www.norskorthoform.no