

TIPS & LØSNINGER

6-2016

Kjære kunde,

Så er sommerferien over for de fleste, og det er igjen full fart.


Vi går en spennende og aktiv høst i møte, med mye kursvirksomhet i både inn- og utland, og vi gleder oss til å vise dere nye og innovative produkter som blir lansert denne høsten.

Kurs med tannlege Finn André Hammer blir satt opp i Oslo og Narvik, se vedlagte invitasjon. Det blir fort fullt, så meld deg på!

All-Bond Universal og TheraCal LC fra Bisco er to produkter som definitivt bør være en del av materialvalget på enhver tannklinikk. En universal bonding til alle prosedyrer, og en lysherdende resinmodifisert kalsium silikat med mange bruksområder.

Verdt å merke seg er også Ceramir, den optimale sementen til sementering av Zirkonia. Ønsker du en prøve, ta kontakt.

Da ønsker vi deg en riktig god høst, og håper du finner nyttig informasjon i denne utgaven av Tips & Løsninger.


Janne Jaffe Hesstvedt
Norsk Orthoform Depot

Et må ha produkt i klinikken!

Creative Color® Pink Opaque

Et velkjent problem hos tannteknikere var maskering av metall.

Dette er også et kjent problem på tannklinikken. Dette løser du enkelt med Creative Color Pink Opaque, som nøytraliserer metall, mørke flekker og misfarget dentin. Creative Color Pink Opaque er en lysherdende kompositt ideell til maskering. Brukes under kompositt og porselen og gir en naturtro restaurering **uten å være opak**, og gir en varm farge slik at restaureringen ikke blir grå.



TIPS: Appliseres med flat pensel (no 3).



Prepared Teeth



Application of Pink Opaque



Finished Restoration

Dentistry and photography by: Bud Mopper, D.D.S., M.S.

15504 Creative Color Pink Opaque
2,5 g

kr 564,-



A magical product. If there is one product everyone should have it is Cosmedent's Pink Opaque.

Corky Willhite, D.D.S.



Laboratories have known for years that Pink will neutralize grey and dark stains and create a more lifelike effect. Pink Opaque was developed with this idea in mind.

Bud Mopper DDS, MS

If there is one product that will make you a better esthetic dentist, it is Pink Opaque.

Larry Rosenthal, DDS

Probably the best bet in neutralizing the blue-grey discoloration of tetracycline.

REALITY Publishing



Den ENESTE universale Bondingen

All-Bond Universal

«Gjør det så enkelt som mulig, men ikke enklere»

All Bond Universal er den perfekte kjemiske sammensetningen i en flaske, om du ønsker selv ets eller total ets teknikk med fosforsyre, for å skape binding til tannsubstans og alle dentale materialer. All Bond Universal brukes til alle direkte og indirekte prosedyrer og gir optimal binding til samtlige fyllingsmaterialer. All Bond Universal er også meget effektivt som en varnish på glassionomerfyllinger.

All Bond Universal inneholder MDP monomer som forbedrer holdbarheten i den adhesive bindingen til tann, kompositt og krone – bro materialer som Zirkonia, e.max og metall.

Ph på 3 gjør All bond Universal kompatibel med dual- og kjemisk herdende komposittmaterialer og sementer.

Den relativt hydrofobe sammensetningen gir bedre binding på lang sikt ved å skape en bedre forsegling mot vannopptak. All Bond Universal flyter lett inn i etsede områder og skaper både kjemisk og mekanisk forsegling etter lysharding.

All Bond Universal, genialt enkel, skaper stabil binding med valgfri etseteknikk, til alle type restaureringer.

15478 All Bond Universal kit kr 1.367,-

1 x 6 ml + tilbehør

15480 All Bond Universal kr 1.160,-

Refill

KJØP 2 fl. All-Bond Universal – FÅ med gratis TheraCal (verdi kr 348,-).

Et produkt du må ha!

TheraCal LC

Klar til bruk. Enkel applisering. Renslig. Hvit. Røntgenkontrast.

Lysherdende resinmodifisert kalsium silikat. Unike apatittstimulerende egenskaper gjør den ideell til direkte – og indirekte pulpaoverkapping. Som en beskyttende **base/liner** under kompositt, amalgam og sement, er TheraCal LC optimalt.

TheraCal LC er en naturlig erstatning til kalsium hydroksid, glassionomer, RMGI og IRM/ZOE grunnet dens interaktive egenskaper.

TheraCal har en basisk pH som fremmer tilheling og hydroksylapatitt dannelse. 28 dager etter pulpaoverkapping vil TheraCal gi en dentinbro som er omtrent like tykk som når Portland Sement brukes, og ca. 5 ganger så tykk om man bruker Dycal eller en glassionomer foring.

Viktig! TheraCal LC bør brukes på en lett fuktig dentinoverflate.


11281 TheraCal™ LC kr 1.390,-
4 x 1,2 cc

KJØP 2 pakker – FÅ en TheraCal gratis (verdi kr 348,-)



HIGH PERFORMANCE CHEMISTRY

Unique Hydrophilic Matrix

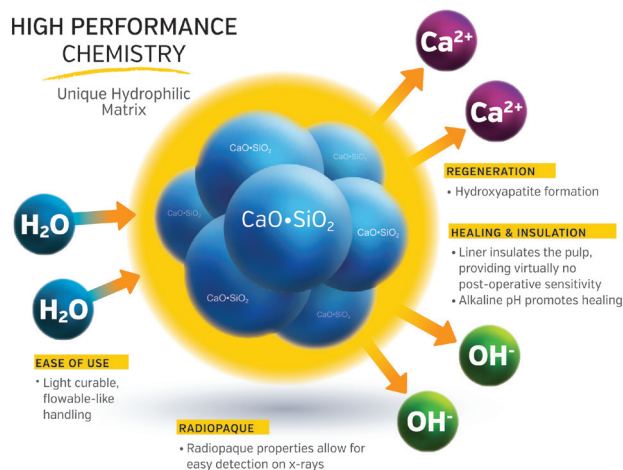

Et uunnværlig hjelpemiddel!

Super Scope lupe

Pentax Optic med 2,5 x forstørrelse og stort synsfelt. Arbeidsavstand ca. 30 cm.

19121 Super Scope lupe

kr 2.047,-

Ønsker du å prøve Ceramir, ring oss og vi sender deg gratis for testing.

Ceramir® QuikCap

Ceramir er et hydrofilt materiale, og sementering i et fuktig miljø er en nødvendighet. Det trengs ikke optimale tørleggingsforhold så lenge blødning er fraværende. Preparering skal være lett fuktig ved sementering. De termiske egenskapene er tilnæringsvis lik dentin og emalje, noe som bidrar til å minimere stress og mikrolekkasje ved temperaturendringer.

Kliniske undersøkelser har vist fravær av postoperative smerter og histologiske undersøkelser har vist at sementen i liten grad irriterer pulpa (fravær av inflammasjoner). Ceramir viser seg også å være særdeles stabil i det orale miljø over tid, og siden det er et bioaktivt materiale så styrkes kompresjonsstyrken over tid. Dette i motsetning til for eksempel selv-etsende sementer.

Fordeler med de nye kapslene:

- **Activator:** Ikke nødvendig. Kapselen aktiveres enkelt ved å trykke den ned.
- **Applicator:** Kapselen passer til de fleste kjente "applicators" som 3M, Voco etc. Ulik mengde sement kan presses ut avhengig av lengden på stempelet, men med de ekstra 0,7 ml vil det likevel være nok til sementering av en krone.
- **Kapselen:** Trenger ikke å vri. De nye kapslene er testet og vist seg å være stabile. Ceramir QuikCap kommer i én størrelse med 0,17 ml.

18991	Ceramir QuikCap Intro Set	kr 1.699,-
	10 x 0,17 ml. kapsler og applicator	
18992	Ceramir QuikCap Refill	kr 2.159,-
	20 x 0,17 ml.	



KJØP Introsett eller refill – FÅ med 2 kapsler gratis (verdi kr 216,-).

”Sementen har meget gode flyteegenskaper og er lett å fjerne. Etter cirka 3 minutter, etter påsetting av restaurering, er sement myk og overskudd fjernes lett med en sonde samt med tanntråd approksimalt. Etter cirka 5 minutter er sement gjennomherdet. Håndteringsegenskapene er meget gode og rengjøringsjobben ved sementfjerning er veldig enkel. Mine 30 første pasienter (preparering på vitale tenner) har blitt ringt opp, og ingen har hatt postoperative plager. Ceramir er nå mitt førstevalg ved sementering av Zirconia-kroner grunnet Zirkonium-oksidents tilbinding til fosfatgruppene i Ceramir. Det er viktig å nevne at Zirconia må rengjøres etter innprøving i munn. Når Zirkonium-oxid reagerer med fosfatgrupper i saliva, ødelegges mulighet for kjemisk binding mellom sement og Zirconia. Vær oppmerksom på at det kan forekomme luftbobler i Ceramir-sementen. Disse dras enkelt ut med en knappsonde eller lommedybdemåler. Jeg anbefaler alle å sette seg inn i dette fremtidsrettede produktet med unike egenskaper.”

Tannlege Petter Haugen, Horten. MNNTF

mild



Trygt, effektivt og skånsomt

White Dental Beauty NOVON Mild

NOVON er en aktiv, patentert ingrediens (US patent No. 8815217B2) som gjør materialet mer stabilt og med en nøytral pH i sprøyten. Ved kontakt med vann øker pH-verdien. Dette gjør at produktet går fra å være basisk til alkalisk og perhydroxyle ioner frigjøres, noe som gir en mer effektiv blekebehandling og tiden det tar halveres sammenliknet med tilsvarende materialer.

Mild er ypperlig for pasienter som lett opplever ising og er ekstra følsomme. Brukes i skinne 2–4 timer daglig. Når man sammenlikner White Dental Beauty 10 % CP (karbamidperoksid) med 5 % CP MILD brukt over like lang tid, får man samme effekt, selv med lavere konsentrasjon av vannstoff, og som et ekstra pluss, mindre følsomhet i tennene.

NOVON gjør at materialet akselererer og gir en blekebehandling som er trygg, effektiv og skånsom mot tennene.

18674	5 % White Dental Beauty MILD with NOVON, pasientkit	kr 529,-
	8 x 1,2 ml syringes	





2 % Klorhexidin som erstatning til Consepsis

Closol 2 %

Closol erstatter Consepsis 2 % klorhexidin. Nøyaktig samme innhold og bruksområder. Inneholder ikke såpe, lett å skylle ut fra kanaler. Ideell til både endobehandling, rengjøring generelt og til kavitetspreparering.

16048	Closol 2 % Klorhexidin 10 ml multidose-flaske	kr 225,-
16047	Closol 2 % Klorhexidin 100 ml multidose-flaske	kr 399,-



Irrigering av rotkanaler

Ipoclor 5

5 % Natrium hypoklorid klar til bruk. Kommer i en glassflaske for å sikre stabilitet av produktet over tid. Ipoclor 5 erstatter Chlorcid.

16049	Ipoclor 5 250 ml	kr 339,-
-------	---------------------	----------

Optimal design og komfort

NeoDrys

Absorberende og lysreflekterende. Myke og behagelige for pasient.

16433	NeoDrys Saliva Absorbents ReFlective Small. 50 stk.	kr 185,-
16434	NeoDrys Saliva Absorbents ReFlective Large. 50 stk.	kr 185,-



Spar tid!

NeoMax Metal Cutters

Ingenting er mer effektivt til å fjerne amalgam og til å splitte kroner i gull og porselen.

15674	NEOMAX 1 10 stk.	kr 580,-
15671	NEOMAX 2 10 stk.	kr 645,-

