

# AKTUELT

Nr. 1 - 2005

Nå går det mot lysere tider på alle måter og dagene er allerede blitt lengre. Den hektiske tiden er lagt bak oss, alle gaver har byttet hånd og vi starter igjen med blanke ark og kan se frem til et helt nytt år.

Vi har fått nytt dataanlegg med alt hva det innebærer. Vi jobber med røde øyne, varme kinn og håret rett til vær. Er det noe alle kan relatere seg til og ha forståelse for er det vel data.

Alt skal være så mye bedre enn det gamle, det kan så være, men før man får alt inn i fingrene føler man seg ganske grønn. Derfor ligger vi litt på etterskudd med våre utsendelser. Tradisjonen tro skulle vi ha startet med januarsalg, men vi får i stedet ta mars salg. Vi har også bursdag i år og fyller hele 75 år. Dette vil vi markere gjennom hele året med overraskelser og begivenheter og selvsagt gode tilbud til våre trofaste kunder.

God vår!

Janne Jaffe Hesstvedt



Nyhet

Øker bindingen

## Noritake CZR Press Shade Base Stain Kit

Shade Base Stain kit er utviklet for pressteknikken men kan med hell også brukes til konvensjonell zirkon påbrenningsteknikk. Fargene er i utgangspunktet enklere å legge, enklere å endre og bindingen øker 5 ganger mellom kappe og porselen. Du slipper dermed å bruke liner/shade base på kappen.

**Et må ha produkt!**

17272 Shade Base Stain Kit kr 5.000,-  
20 x 3 gr. Pulver/1 x 10 ml væske

Nyhet



## Noritake Crack Finder

Med kun noen dråper eller ett strøk med Noritake Crack Finder kan du enkelt få øye på usynlige fine sprekker på både Alumina og Zirkonia kapper. Dypp kappen og blås med luft. Er det sprekker vil disse farges blå. Kappen må ikke brukes dersom du finner sprekker, disse vil bare bli større og kronen vil til slutt krakelere.

17271 Crack Finder kr 422,-  
2 flasker a 20 ml.

## Noritake CZR Cerabien

Et spesielt utviklet porselen for alle keramiske kroner/brøer ved bruk av Zirkonia. Fremkaller ingen allergier og har den fordelen at den ikke gir svarte linjer i det servikale området.

17207 Noritake CZR kit kr 8.236,-

Unngå sorte prikker i porselenet


Se prisen!

## Aurium Surebond 66 SF

Ett av Norges mest solgte PG metaller. Det reneste metallet på markedet! Suverene støpeegenskaper, utvidelseskoeffisient som korresponderer med de fleste kjente porselener. AU 66%.

10024 Aurium Surebond 66 SF  
25 gram

dagspris  
priseks. pr. april 2005:  
kr 101,25 per gram netto,  
inkl. m.v.a.

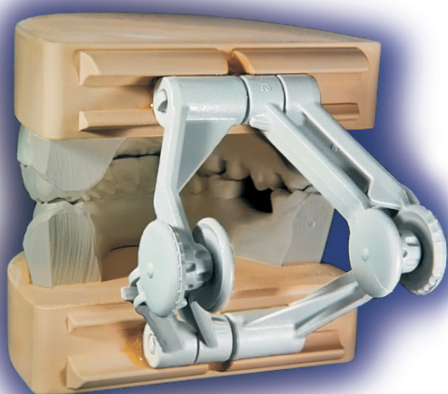


- 10 %

Slutt med bøyeøvelser!

## Orbix

Bruker du fremdeles en artikulatør som du må bøye og tøye for å få til funksjonsbevegelser? Antagelig får du det ikke til likevel. Se nøye på sidebevegelsene, hvis du i det hele tatt får noen. Klarer du å beholde balansert okklusjon posteriort? Hvordan ivaretar du den vertikale presisjonen med en fleksibel artikulatør? Den patenterte Cenloc™ funksjonen hos Orbix muliggjør to distinkte funksjonsmåter: - nemlig presis, låst sentricmodus, og fri, bevegelig modus som lar deg gjøre lineære protrusjonsbevegelser. Prøv Orbix neste gang, så vil du oppdage at gjentatte bittjusteringer hører fortiden til. Vi garanterer at du blir fornøyd!

14831 Orbix introduksjonssett kr 1.150,-  
14832 Orbix artikulatør, refill kr 836,-  
100 stk.  
14835 Orbix adapter kr 122,-

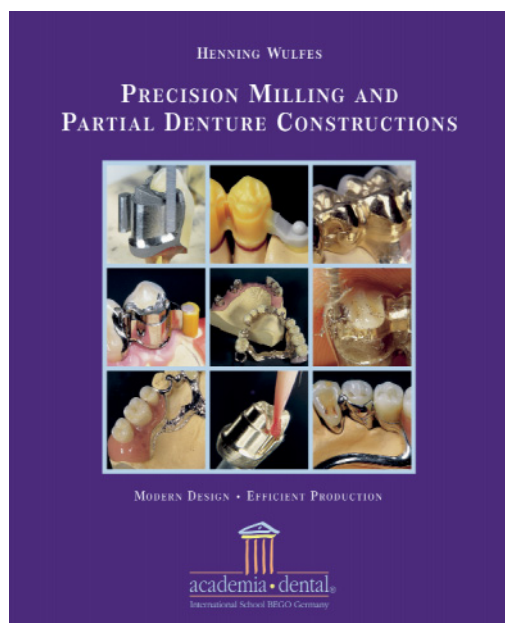

Nyhet

## Precision Milling and Partial Denture Constructions

av Master Dental Technician, Henning Wulfes, leder for academia•dental international school Bego Germany

Denne boken er skrevet for ambisiøse tannteknikere med sans for detaljer. Boken gir en utrolig god forståelse for partielle proteser og fresing, praktisk og meget detaljert informasjon med bilder fra arbeidets start til slutt. 280 sider med 1000 fargebilder og illustrasjoner gjør denne boken til et praktverk for enhver tanntekniker.

UR 3 Precision Milling and Partial Denture Constructions kr 598,-  
Prøve på Steribim Plus

## Se og lær Virtual Academica

Med dette CD programmet åpner Bego helt nye muligheter for tannteknisk videreutdanning. Interaktive CD-Rom beskriver arbeidsgruppen fra A-Å. Fra modellanalyse til ferdige arbeidet. Med stillbilder og videoklipp får du se hvordan hele prosessen kan gjøres. Oppvoksing, investering, støping m.m. beskrives i detalj. Du vil også kunne finne "troubleshooting" på flere materialer og teknikker.

UR 3 Virtual Academica kr 275,-  
Part I og II  
UR 3 Virtual Academica kr 340,-  
C&B technique



Nyhet



## Bellavest SH

Bellavest SH er en fosfatbundet investment og den mest solgte investmenten for krone – og bro teknikk i Europa. Bellavest SH kan brukes universalt, dvs. både konvensjonelt og til sjokk heat metoden. Arbeidstid er kun 5 minutter. Materialet herder med god kantstyrke og er lett å banke ut. Ekstrem glatt overflate både med PG metaller og krom – kobolt materialer som for eksempel Wirobond C.

11029 Bellavest SH, 160 gr kr 758,-  
4,8 kg  
11027 Bellavest SH, 60 gr kr 989,-  
4,5 kg  
Få med gratis væske

## Wironium

Vi feirer med jubileumspakker på Wironium hvor du får med 100 gram ekstra materiale og eksklusive esker i stål og fløyel. Eskene kan brukes som transportesker eller små hendige gaveesker.

10240 Wironium  
1000 g

kr 2.586,-



## Slik får du "super" gips... Epox-it Liquid

Bruk Epox-it liquid i stedet for vann og du får en gips som er sterkere og seigere med en unik overflate.

14675 Epox-It Liquid  
4 liter

kr 2.966,-

## Steribim Super

«Hygienisk forpolering med kvartsfritt materiale».

Vår positive innstilling til miljøet er blitt en viktig del av hverdagen, og derfor er det naturlig å rette oppmerksomheten på det hygienisk sensible området - forpolering på laboratoriet. Kvartsinnholdet i tradisjonelle og naturlig pimpestenpulver kan forårsake silikose. Med Steribim Super får du enda bedre forpoleringsegenskaper samtidig som helseisikoen pga. kvartsen elimineres. Steribim Super er både kvartsfri og bakteriedrepende.

- Spar tid gjennom ennå høyere poleringseffekt.
- Alltid like høy kvalitet grunnet bruk av naturlige mineraler.
- Meget kostnadseffektiv – kan forbrukes ned til siste gram.
- Steribim Super er et effektivt bidrag til hygienen på laboratoriet.

Håndteringen er ytterst enkel. Steribim Super blandes med vann til ønskelig konsistens.

"Steribim Super har en bakteriedrepende effekt selv ved kraftig kontaminering av den brutte forpakningen. Fornytt tilvekst av bakterier er ingen risiko selv ved lange brukstider."

Die Staatliches Hygiene-Institut i Bremen

11870 Steribim Super  
10 kg

kr 588,-



Norsk Orthoform Depot as

Tvetenveien 158 - Postboks 95, NO-0617 Oslo, Norway - Telefon +47 2276 0140  
Telefax +47 2226 0230 - bestilling@norskorthoform.no - www.norskorthoform.no